





PHYSIOESTHÉTIKA
TECHNOLOGIE

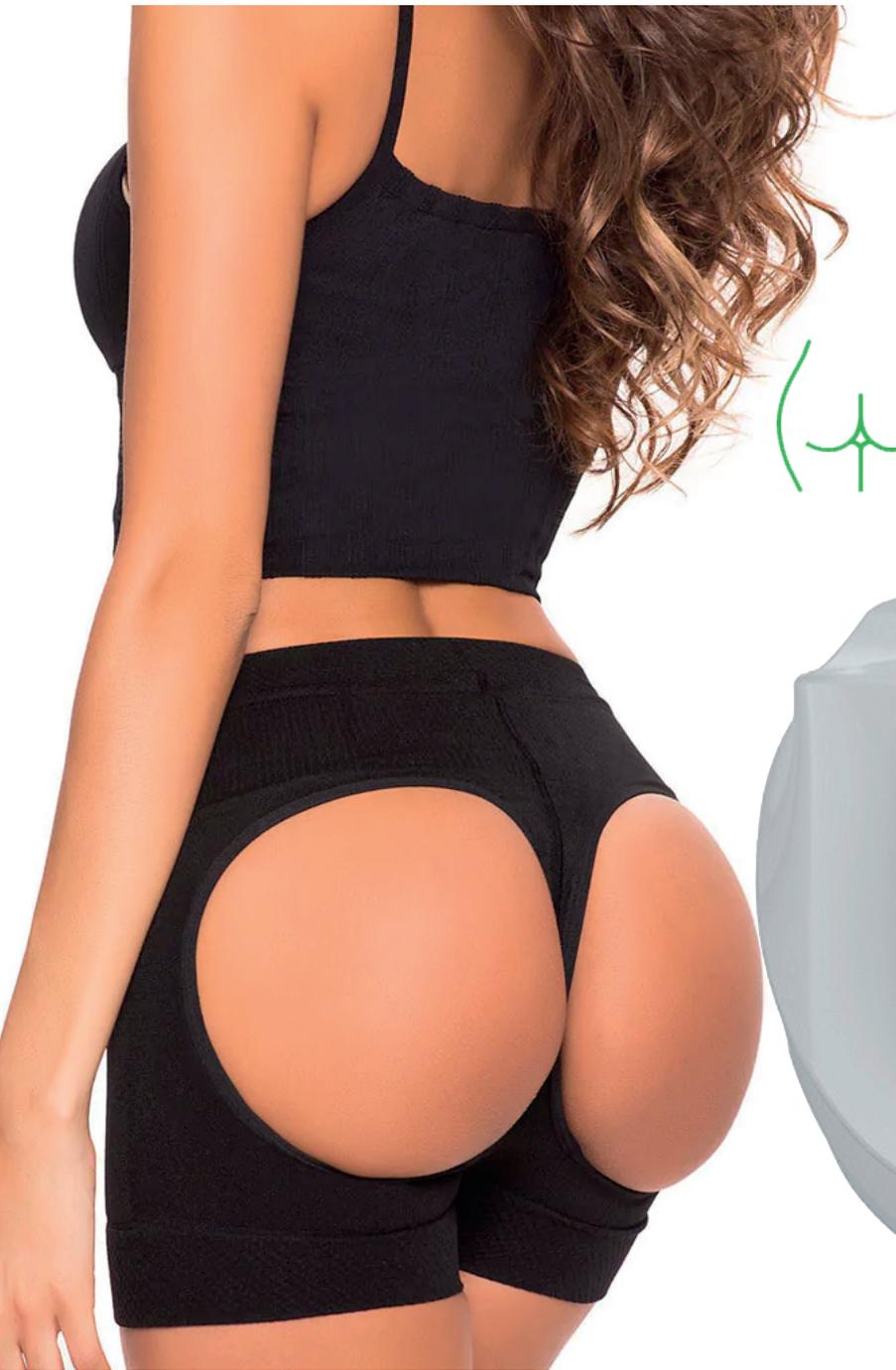

Bella Vacuum V4 PRO

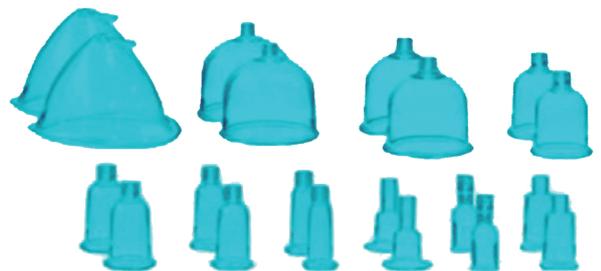

Levage des fesse

Augmentation mammaire

Thérapie par ventouses

Palper rouler

Principe

La pompe à vide spécialement conçue peut rapidement améliorer la taille et la forme ou la poitrine, sans douleur ni risque pour la santé, elle n'implique pas d'injection de silicone ni de pousser et de remplir un soutien-gorge, cela vous ferait avoir une poitrine naturelle et jolie selon la période physiologique.

1. La pompe à vide peut absorber les particules de graisse et les liquides, puis les faire pénétrer dans le tissu et les cellules du sein, laissant la poitrine plus développée.
2. Évacuer la toxine et purifier le système lymphatique, affiner les pores de la peau, reconstruire la peau, améliorer la micro-circulation, améliorer l'élasticité du collagène, soulever un muscle tombant, résister aux rides, activer la peau, retirez le sac oculaire et la double mâchoire, éliminez les rides et la télangiectasie et traitez la sous-santé.
3. Stimuler l'hypophyse pour produire l'hormone, améliorer l'élasticité et la fibre des tissus musculaires, reprendre l'élasticité et la douceur des seins, soulever et développer les seins, améliorer la forme des seins, laisser améliorer le mamelon de succion, stabiliser l'effet du traitement.
4. Accélérer la transformation des acides gras, éliminer en toute sécurité et efficacement l'excès de graisse, réduire le poids, amincir le corps, éliminer l'excès de graisse sur le ventre, améliorer la forme des jambes, améliorer la peau, il peut s'appliquer pour le gommage, la thérapie par percussion ponctuelle, la détoxification lymphatique, traiter la cellulite, améliorer les fesses pour réaliser un contour corporel parfait.

Pièces

Levage des fesses

1. Choisissez le type de tasse approprié et connectez la tasse et la prise d'inspiration avec un tube flexible.
2. Tournez le bouton de pression d'air au point le plus haut de la tasse, tournez le bouton de force au point le plus bas, puis appuyez sur la mise sous tension et le choix fonctionnel pour choisir l'inspiration, et tournez le bouton de rythme en traitement.
3. Réglez le bouton de force de faible à fort, puis ajustez la pression de l'air jusqu'à ce que les clients se sentent à l'aise.

Développement des seins

1. Choisissez le bonnet en fonction des besoins du client et connectez la tasse et la prise d'aspirateur.
2. Laissez les clients dormir à moitié pour étirer la poitrine, couvrez la poitrine avec un chiffon en plastique et ne l'appliquez pas sur les personnes ayant des seins affaiblis.
3. Tournez le bouton de pression d'air au point le plus haut de la tasse, tournez le bouton de force au point le plus bas, appuyez ensuite pour choisir l'inspiration et tournez le bouton de rythme pour soulever les seins (ou appuyez sur le rythme corporel 1, le rythme corporel 2 et le levage des seins alternativement).
4. Mettez la tasse sur la poitrine, et laissez la poitrine et la tasse étroitement touchent. Pour les personnes ayant différentes tailles de poitrine, il est suggéré d'appliquer l'instrument sur un côté plus petit 5 fois avant de l'appliquer sur deux côtés ensemble.
5. Réglez le bouton de force de faible à fort, puis réglez la pression de l'air jusqu'à ce que les clients se sentent à l'aise.
6. Après 20 minutes, tournez le bouton de pression d'air sur le point le plus élevé, tournez le bouton de force vers le point le plus bas pour enlever la tasse, puis appliquez une crème de levage des seins.

traitement de Massage rythmique (déplacement du bout des doigts en métal)

1. Choisissez le type approprié de doigt en mouvement, et connectez la tasse et la prise d'inspiration avec un tube flexible.
2. Tournez le bouton de pression d'air au point le plus haut de la tasse, tournez le bouton de force au point le plus bas, puis appuyez sur la mise sous tension et le choix fonctionnel pour choisir l'inspiration et tournez le bouton de rythme pour faire face au rythme ou au rythme corporel (ou appuyez sur le rythme corporel 1, le rythme corporel 2 alternativement, Rythme du visage 1 et 2 alternativement).
3. Réglez le bouton de force de faible à fort, puis ajustez la pression de l'air jusqu'à ce que les clients se sentent à l'aise.
4. Après 20 minutes, tournez le bouton de pression d'air au point le plus élevé et tournez le bouton de force au point le plus bas pour enlever le doigt en mouvement.

